

# FreeStyle Libre

SYSTÈME FLASH D'AUTOSURVEILLANCE DU GLUCOSE

## Guide de démarrage rapide



**Lecteur**

Port USB

Écran tactile

Bouton Accueil

**Pack de capteur**

**Applicateur de capteur**

Les codes sur les étiquettes doivent correspondre

- 1 Assemblez le capteur et appliquez-le sur votre corps**
- 2 Démarrez le nouveau capteur avec le lecteur**

Attendez 60 minutes pour le démarrage

**Vous pouvez vérifier votre taux de glucose chaque fois que vous le souhaitez pendant un maximum de 14 jours**

## 1 Assemblez le capteur et appliquez-le sur votre corps

### Préparez-vous

### ÉTAPE 1



Sélectionnez un site sur l'arrière du haut du bras.


**Remarque :** Évitez les cicatrices, les grains de beauté, les vergetures, les bosses et les sites d'injection de l'insuline. Pour éviter l'irritation de la peau, alternez les sites entre les applications. Tenez compte de votre confort et de vos activités.

### ÉTAPE 2



Nettoyez le site avec une lingette imprégnée d'alcool. Laissez le site sécher avant de poursuivre.

### ÉTAPE 3

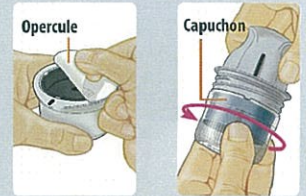

Retirez complètement l'opercule du pack de capteur. Dévissez le capuchon de l'applicateur de capteur.

**MISE EN GARDE :** Les codes de capteur doivent correspondre sur le pack de capteur et l'applicateur de capteur.



### Préparez l'applicateur de capteur

### ÉTAPE 4



Alignez la marque sombre de l'applicateur de capteur avec celle du pack de capteur. Pressez fermement l'applicateur de capteur vers le bas jusqu'à ce qu'il parvienne à une butée.

### ÉTAPE 5



Sortez l'applicateur de capteur du pack de capteur.

### ÉTAPE 6




L'applicateur de capteur est prêt à appliquer le capteur.

**MISE EN GARDE :** L'applicateur de capteur contient désormais une aiguille. Ne touchez pas à l'intérieur de l'applicateur de capteur ou remettez-le dans le pack de capteur.

### Appliquez le capteur


### ÉTAPE 7

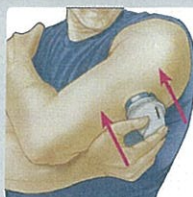

Placez l'applicateur de capteur au-dessus du site et poussez fermement vers le bas pour appliquer le capteur.


**MISE EN GARDE :** Ne poussez pas l'applicateur de capteur vers le bas avant qu'il ne soit placé au-dessus du site préparé, pour éviter des résultats imprévus ou une lésion.

### ÉTAPE 8

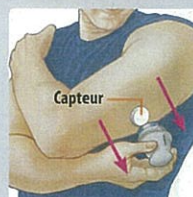

Éloignez doucement l'applicateur de capteur de votre corps.


### ÉTAPE 9

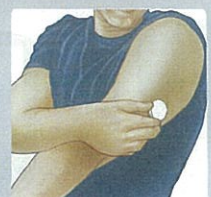

Assurez-vous que le capteur est bien fixé.

Éliminez le pack de capteur et l'applicateur de capteur usagés conformément aux réglementations locales.

## ÉTAPE 1

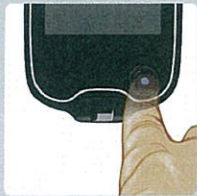

Appuyez sur le bouton Accueil pour allumer le lecteur.

**Remarque :** Si vous utilisez le lecteur pour la première fois, suivez les invites pour définir la date, l'heure et la plage cible taux de glucose.

## ÉTAPE 2



Touchez **Démarrer le nouveau capteur**.

## ÉTAPE 3




Maintenez le lecteur à moins de 4 cm (1,5 pouces) du capteur pour le scanner.

Le capteur peut être utilisé pour vérifier votre taux de glucose au bout de 60 minutes.



# 3 Vérifiez votre taux de glucose

## ÉTAPE 1

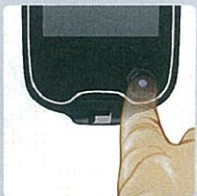

Appuyez sur le bouton Accueil pour allumer le lecteur.

## ÉTAPE 2



Maintenez le lecteur à moins de 4 cm (1,5 pouces) du capteur pour le scanner.

## ÉTAPE 3




Le lecteur montre vos résultats de taux de glucose.

## Comprendre vos résultats de taux de glucose

### Graphique du taux de glucose

Graphique des taux de glucose actuel et enregistrés

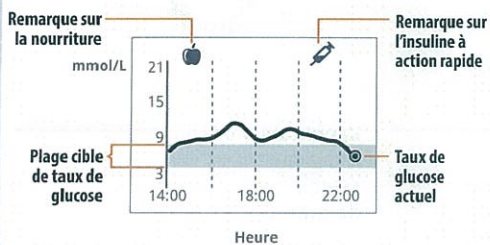

### Message

Touchez pour obtenir davantage d'informations



### Ajouter des remarques

Touchez pour ajouter des remarques sur le résultat du taux de glucose

### Taux de glucose actuel

Taux de glucose lors de votre dernier scan


### Flèche de tendance de taux de glucose

Sens d'évolution de votre taux de glucose

Flèche	Signification
↑	Taux de glucose en augmentation rapide
↗	Taux de glucose en augmentation
→	Taux de glucose en modification lente
↘	Taux de glucose en baisse
↓	Taux de glucose en baisse rapide

# 4 Examinez votre historique

## ÉTAPE 1

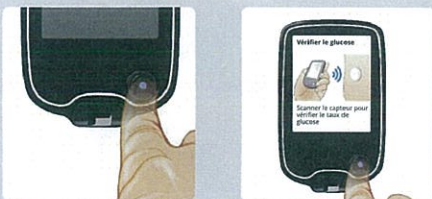


Appuyez sur le bouton Accueil pour allumer le lecteur. Appuyez de nouveau sur le bouton Accueil pour aller sur l'écran d'accueil.

## ÉTAPE 2



Touchez **Revoir l'historique**.

## ÉTAPE 3

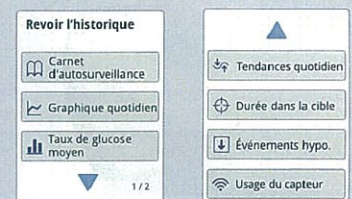

Sélectionnez une option à visualiser.